

Clearblue® DIGITAL

Prueba de embarazo

con INDICADOR DE SEMANAS

- Si va a realizar la prueba a partir del día en el que debería iniciarse el período, podrá hacerla en cualquier momento de la jornada para averiguar si está embarazada.
- Si va a realizar la prueba antes del día en el que debería iniciarse el período, utilice la primera orina de la mañana.
- Para que el resultado del indicador de semanas sea preciso, deberá utilizar la primera orina de la mañana.
- Evite beber demasiado líquido antes de realizar la prueba.
Lea este folleto con atención antes de realizar una prueba.

1 Realice la prueba

Cuando esté preparada para realizar la prueba, extraiga la varilla de prueba del envoltorio de aluminio y retire el capuchón azul. Utilice la varilla de prueba de inmediato.

O
Puede realizar la prueba en el flujo de orina

- Coloque el colector de muestras absorbente orientado hacia abajo en su flujo de orina **únicamente durante 5 segundos**.
- Tenga cuidado de no humedecer el resto de la varilla de prueba.
- Se recomienda sustituir el capuchón y poner la varilla de prueba en una superficie plana.




Tomar una muestra de orina en un recipiente limpio y seco

- Coloque el colector de muestras absorbente orientado hacia abajo en la orina, tal como se muestra, **únicamente durante 20 segundos**.
- Se recomienda sustituir el capuchón y poner la varilla de prueba en una superficie plana.



2 Espere...

- El símbolo de espera parpadeará para indicar que la prueba está en curso.
- Cuando el símbolo de espera deje de parpadear, se mostrará el resultado. Si no aparece el símbolo de espera después de usar la prueba, *consulte la pregunta 6 en la sección "Preguntas y respuestas"*.

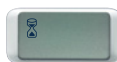

Nunca sujete la varilla de prueba con el colector de muestras absorbente mirando hacia arriba durante las pruebas.

3 Vea su resultado

La prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL cuenta con un **indicador de semanas** que le indica aproximadamente cuánto tiempo lleva embarazada. Esta información se muestra en la pantalla junto con la indicación "Embarazada".

- En un período de **3 minutos**, el resultado se mostrará en la pantalla.
- Es posible que la indicación "Embarazada" aparezca en la pantalla **antes** del resultado del indicador de semanas. **Siga esperando** hasta que el símbolo de espera deje de parpadear para ver el resultado del indicador de semanas. Este proceso puede tardar hasta 3 minutos.
- Algunos resultados pueden aparecer en tan solo 1 minuto.
- El resultado permanecerá en la pantalla durante aproximadamente 24 horas.
- Si el resultado es positivo, debe consultar a su médico para que le aconseje sobre las medidas que debe adoptar. Su médico calculará la fase de embarazo en función del primer día de su último período.
- La concepción tiene lugar unas 2 semanas antes de la fecha en que debería iniciarse el siguiente período. El indicador de semanas indica aproximadamente cuánto tiempo lleva embarazada.

- El indicador de semanas ofrece una precisión del 93% en la detección del momento de la concepción. El cálculo se basa en el nivel de la hormona del embarazo, hCG o gonadotropina coriónica humana, en la orina. El nivel de hCG varía de una mujer a otra y, por lo tanto, es posible que el indicador de semanas muestre ocasionalmente resultados erróneos. La precisión de los resultados "Embarazada" y "No Embarazada" es superior al 99% si la prueba se realiza a partir del día en que debería iniciarse el período.

Errores de la prueba

Lea la sección "Errores de la prueba" si ha utilizado la varilla de prueba y la pantalla no muestra ninguno de los resultados indicados en esta página.

Cómo interpretar los resultados

Resultados	Tiempo transcurrido desde la concepción	Datación del embarazo por parte del médico (basada en un ciclo de 28 días)*
No Embarazada	El resultado es negativo. Consulte la pregunta 13 en la sección "Preguntas y respuestas".	-
Embarazada 1-2	El resultado es positivo y se quedó embarazada hace 1 o 2 semanas aproximadamente.	De 3 a 4 semanas
Embarazada 2-3	El resultado es positivo y se quedó embarazada hace 2 o 3 semanas aproximadamente.	De 4 a 5 semanas
Embarazada 3+	El resultado es positivo se quedó embarazada hace más de 3 semanas.	Más de 5 semanas

* Su médico calculará la fecha de su embarazo en función del primer día del último período, no en función del día de la concepción.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1 ¿Cómo funciona la prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL?

Durante el embarazo, el cuerpo produce la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (hCG). La cantidad de hCG en su cuerpo aumenta en las primeras etapas del embarazo. Clearblue® puede detectar diminutas cantidades de esta hormona en su orina (la sensibilidad de esta prueba es de 25 mIU/ml). En función del nivel de hCG en su orina, el indicador de semanas calcula la fecha en que se quedó embarazada.

2 ¿Cuál es el grado de precisión de la prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL en la detección del embarazo?

En las pruebas de laboratorio, la prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL ofrece una precisión superior al 99% en la detección de embarazo si se utiliza a partir de la fecha en que debería iniciarse el período. Si realiza la prueba antes de la fecha en que debería iniciarse el período y el resultado es negativo, aún existe la posibilidad de que esté embarazada. *Consulte la pregunta 4.*

3 ¿Cuál es el grado de precisión del indicador de semanas de la prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL?

El indicador de semanas ofrece una precisión del 93% en la detección del momento de la concepción. El cálculo se basa en el nivel de hCG en la orina. El nivel de hCG varía de una mujer a otra, y por lo tanto, es posible que el indicador de semanas muestre ocasionalmente resultados erróneos. El indicador de semanas ha demostrado una coincidencia del 97% con la datación mediante ecografía que se realiza posteriormente (entre la semana 11 y la 13). Este dato está basado en estudios realizados a 187 mujeres en los que se compararon los resultados (pasadas entre 1 o 2, entre 2 o 3 y más de 3 semanas desde la concepción) con la datación mediante ecografía. Si realiza la prueba más de 6 semanas después de la concepción, el indicador de semanas puede mostrar resultados inesperados. Esto se debe a que el nivel de hCG en la orina puede ser demasiado alto para mostrar un cálculo preciso del tiempo transcurrido desde la concepción.

4 ¿Cuándo puedo utilizar la prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL?

La prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL se puede utilizar hasta 5 días antes de la primera falta (es decir, 4 días antes de la fecha en que debería iniciarse el período). Si realiza la prueba antes de la fecha en que debería iniciarse el período y el resultado es negativo, aún existe la posibilidad de que esté embarazada. Consulte la siguiente tabla para ver los resultados ofrecidos por la prueba de embarazo Clearblue® DIGITAL en ensayos clínicos con muestras de etapas tempranas del embarazo.

Pruebas antes de la primera falta

Número de días antes de la primera falta	-1	-2	-3	-4
% de muestras de mujeres embarazadas con resultado positivo	98%	97%	90%	65%

Si el resultado es negativo, pero sigue sospechando que puede estar embarazada, *consulte la pregunta 13.*

Para averiguar cuándo debería iniciarse el período, calcule la duración habitual de su ciclo mediante el recuento de los días que transcurren desde el primer día del período hasta el día anterior al inicio del período siguiente.

• Si tiene ciclos irregulares, se recomienda esperar la duración del ciclo más largo de los últimos meses antes de realizar la prueba.

• Si no sabe cuándo debería iniciarse el período, le recomendamos que realice la prueba transcurridos como mínimo 19 días desde la última vez que mantuvo relaciones sin protección.

5 ¿Algunos medicamentos o enfermedades pueden alterar el resultado?

• Lea siempre las instrucciones de los fabricantes de cualquier medicamento que esté tomando antes de realizar una prueba.

• Los medicamentos para la fertilidad que contienen hCG pueden ofrecer resultados erróneos, ya que dichos medicamentos se suelen administrar mediante inyección y, si se realiza la prueba justo después de su administración, el resultado puede ser un falso positivo.

• Otras terapias de fertilidad (como el citrato de clomifeno), los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (p. ej., la píldora anticonceptiva) no deberían alterar el resultado.

• Si ha dejado de utilizar recientemente anticonceptivos hormonales o está usando terapias de fertilidad, como el citrato de clomifeno, es posible que sus períodos sean irregulares y que realice la prueba demasiado pronto.

• Si ha estado embarazada recientemente (aunque el embarazo no haya llegado a término), puede obtener un falso resultado positivo.

• Si está en la menopausia o se está acercando a ella, puede obtener un falso resultado positivo aunque no esté embarazada.

• El embarazo ectópico y los quistes de ovario pueden ofrecer resultados erróneos.

• Los embarazos ectópicos y múltiples pueden hacer que el indicador de semanas muestre resultados erróneos.

Si obtiene resultados inesperados, debería consultar a su médico.

6 He utilizado la prueba, pero no ha aparecido el símbolo de esperar. ¿Qué significa esto?

La prueba no ha funcionado correctamente. *Consulte la sección de errores de la prueba.*

7 He utilizado la prueba, pero el resultado no ha aparecido en la pantalla. ¿Qué significa esto?

Su resultado debe aparecer en la pantalla en un período de 3 minutos. Si no aparece, *consulte la sección de errores de la prueba.*

8 La prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Si el resultado es positivo, debe consultar a su médico para que le aconseje sobre las medidas que debe adoptar. El indicador de semanas únicamente ofrece un cálculo de la fecha de la concepción. Su médico calculará la fase del embarazo en función del primer día de su último período. La concepción tiene lugar unas 2 semanas antes de la fecha en que debería iniciarse el siguiente período.

9 La prueba dice que estoy embarazada, pero no creo que me quedara embarazada en la fecha que muestra el indicador de semanas. ¿Es posible?

El indicador de semanas ofrece una precisión del 93% si se realiza la prueba con la primera orina del día. Algunos medicamentos o enfermedades pueden alterar el resultado. *Consulte la pregunta 5.*

10 Realicé la prueba ayer y el resultado fue positivo. Hoy he vuelto a realizar la prueba y, según el indicador de semanas, el número de semanas transcurridas desde la concepción se ha reducido. ¿Qué debo hacer?

El nivel de hCG varía a medida que aumenta y, por lo tanto, es posible que el indicador de semanas ofrezca resultados inesperados si realiza pruebas en

días consecutivos. *Realice la prueba dentro de 5 días y, si el resultado del indicador de semanas sigue mostrando que el número de semanas transcurridas desde la concepción se ha reducido, consulte la pregunta 12.*

11 Realicé la prueba anteriormente y el resultado fue positivo. He vuelto a realizar la prueba y el resultado ha sido negativo o ha comenzado un período. ¿Qué significa esto?

Aunque la precisión de la prueba es superior al 99% en la detección de la hormona del embarazo a partir del día en el que debería iniciarse el período, es posible que se indique un resultado positivo que más tarde resulte ser negativo (es decir, que se obtenga un resultado negativo más adelante o que se inicie el período). Esto puede deberse a un aborto espontáneo durante las primeras fases de gestación, conocido como "aborto espontáneo precoz", y que, desgraciadamente, no es infrecuente, ya que se da aproximadamente en 1 de cada 4 embarazos. Si obtiene resultados inesperados, pida consejo a su médico.

12 Realicé la prueba la semana pasada y el resultado fue positivo. He vuelto a realizar la prueba y, según el indicador de semanas, el número de semanas transcurridas desde la concepción se ha reducido. ¿Qué debo hacer?

Si realizó la prueba siguiendo las instrucciones, las dos veces con la primera orina del día, y el indicador de semanas ofreció resultados inesperados, debe acudir al médico.

13 La prueba dice que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Puede que no esté embarazada, o que el nivel de la hormona del embarazo no sea lo suficientemente alto para ser detectado, o que haya calculado mal el día en que debería iniciarse el período.

- Si ha realizado la prueba antes de la primera falta, vuelva a realizarla cuando esta se produzca.
- Si ya se ha producido la falta, realice de nuevo la prueba dentro de tres días. Si el resultado de la prueba es negativo y sigue sin tener el período, acuda al médico.

ERRORES DE LA PRUEBA

- Error de libro:** ha ocurrido un error durante las pruebas. Puede ser que:
- El colector de muestras absorbente no se mantuviera hacia abajo o la prueba no se colocara en una superficie plana después de aplicar la orina.
 - Se aplicara demasiada o poca cantidad de orina. Debe realizar nuevamente otra prueba siguiendo minuciosamente las instrucciones.

- Error en blanco**
La prueba no ha funcionado según lo esperado. Es posible que no se hayan seguido las instrucciones de uso. Deberá realizar otra prueba. Siga las instrucciones de uso minuciosamente.

CÓMO DESECHAR LA PRUEBA

Extraiga la pila antes de desechar la varilla de prueba. La pila debe desecharse de acuerdo con las normas de reciclaje correspondientes. Para extraerla, introduzca una moneda en el extremo de la ranura y gírela para abrir la parte posterior de la varilla de prueba. Si no se ve la pila, saque el soporte de esta deslizandolo en la dirección de la flecha para facilitar la extracción. **Precaución:** No desmonte, recargue ni arroje las pilas al fuego. Deshágase del resto de la varilla de acuerdo con las normas de reciclaje correspondientes a equipos eléctricos. No tire el equipo eléctrico al fuego.



Este dispositivo cumple los requisitos sobre emisiones electromagnéticas establecidos por la norma EN61326. Por lo tanto, sus emisiones electromagnéticas son bajas. En principio, no deberían producirse interferencias con otros equipos electrónicos. Esta prueba no debe usarse cerca de fuentes de gran radiación electromagnética como, por ejemplo, teléfonos móviles, ya que puede que la prueba no funcione correctamente. Para evitar descargas electrostáticas, no utilice la prueba en ambientes muy secos, especialmente si hay materiales sintéticos.



Prueba de embarazo para uso doméstico. Solo para autodiagnóstico *in vitro*. No destinada a uso interno. Manténgala fuera del alcance de los niños. Si se almacena en frío, déjela a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba. No utilice una varilla de prueba si el envoltorio de aluminio que la contiene está dañado. No utilice varillas de prueba caducadas. Este producto incorpora pilas. Deseche la prueba de acuerdo con las normativas locales.



Estas instrucciones corresponden al número de modelo CB9A004F.

	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Código de lote		No reutilizar
	Limitación de temperatura 2°C-30°C		Utilizar antes de		Fabricante



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra, Suiza.
Clearblue es una marca comercial de SPD. © 2015 SPD. Todos los derechos reservados.

www.clearblue.com
Agentes disponibles de 08:00 a 16:00 h. Lun - Vie, excepto festivos.
900 816 706
Gratuito desde red fija, se podrían aplicar cargos adicionales desde red móvil. Todas las llamadas son grabadas y podrían ser monitoreadas por motivos de control de calidad. Por favor, tenga el número de lote del producto disponible.