

Clearblue® PLUS

Prueba de embarazo

con PUNTA QUE CAMBIA DE COLOR

- Clearblue® PLUS tiene una precisión superior al 99 % a partir de la fecha en que debería iniciarse el período.
 - Clearblue® PLUS puede emplearse a partir de 5 días antes de la primera falta.
- Lea este folleto con atención antes de realizar una prueba.

Antes de empezar

Utilice un reloj para realizar la prueba; le será de ayuda.

1 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Si realiza la prueba a partir del día en que debería iniciarse el período, podrá hacerla a cualquier hora del día. Si va a realizar la prueba antes del día en el que debería iniciarse el período, utilice la primera orina de la mañana. Cuando esté preparada para realizar la prueba, extraiga la varilla de prueba del envoltorio de aluminio y retire el capuchón azul. Utilice la varilla de prueba de inmediato.

REALICE LA PRUEBA DE ORINA

Puede realizar la prueba directamente en el flujo de orina o en una muestra recogida en un recipiente seco y limpio.

- Sostenga la punta que cambia de color de manera que apunte

Consulte el punto 7 si la punta que cambia de color no se ha vuelto completamente rosa.



- hacia abajo en el flujo de orina o en la muestra de orina recogida, tal como se muestra, durante **5 segundos**.
- La punta que cambia de color se volverá rosa rápidamente para indicar que está absorbiendo la orina.



Mantenga la punta que cambia de color en la orina durante 5 segundos.

Empiece a contar los 5 segundos en cuanto la punta que cambia de color se vuelva rosa.

Flujo de orina Muestra recogida

Mantenga la punta que cambia de color en la orina durante 5 segundos.

- Mantenga la punta que cambia de color de manera que apunte hacia abajo o coloque la varilla de prueba en posición horizontal sobre una superficie plana hasta que esté preparada para leer el resultado y se muestre una línea azul en la ventana de control.
- Puede volver a colocar el capuchón.



ESPERE 3 MINUTOS.

Cuando la prueba empiece a funcionar, comenzarán a formarse una o varias líneas azules.


3 CONSULTA DEL RESULTADO

Podrá leer el resultado en la ventana de resultado.

Debe aparecer una línea azul en la ventana de control cuando lea el resultado. Esta línea indica que la prueba ha funcionado correctamente.

Un resultado positivo podría aparecer pasado 1 minuto si realiza la prueba a partir del día de la falta del período (es decir, el día posterior a aquel en el que el período debería haberse iniciado, pero no lo hizo). Deberá esperar

3 minutos para confirmar un resultado negativo o si realiza la prueba antes de la primera falta (consulte el punto 11). Si la línea azul no se muestra en la ventana de control en el plazo de **10 minutos**, significa que la prueba no ha funcionado (consulte el punto 8).

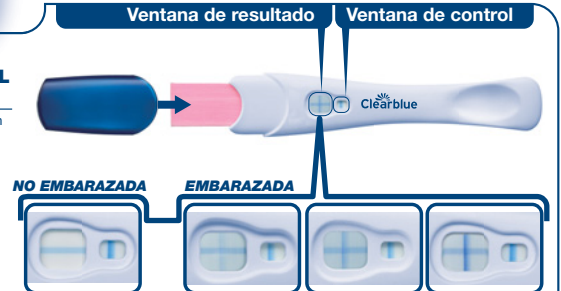

NO EMBARAZADA
Si el resultado es negativo, consulte el punto 13 de la sección Preguntas y respuestas.

EMBARAZADA

Figura A Figura B Figura C

Si el resultado es positivo, consulte el punto 14 de la sección Preguntas y respuestas.

No importa que una de las líneas que forman el símbolo "+" sea más clara o más oscura que la otra; el resultado sigue siendo positivo.

IMPORTANTE:

Lea el resultado durante los **10 minutos** posteriores a la realización de la prueba.

Ignore cualquier cambio una vez transcurrido ese tiempo. Si todavía tiene dudas acerca del resultado, consulte el punto 9 para obtener más información.

Preguntas y respuestas: en la siguiente sección encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes.

Preguntas y respuestas

1 ¿Qué precisión ofrece Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS ofrece una precisión superior al 99 % en pruebas de laboratorio cuando se utiliza desde la fecha en que debería iniciarse el período.

2 ¿Cómo funciona Clearblue® PLUS?

Durante el embarazo, el cuerpo produce la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG en el cuerpo aumenta al comienzo del embarazo. Clearblue® PLUS puede detectar diminutas cantidades de esta hormona en la orina (la sensibilidad de esta prueba es de 25 mIU/ml).

3 ¿Cuándo puedo utilizar una prueba Clearblue® PLUS?

La prueba de embarazo Clearblue® PLUS se puede utilizar hasta 5 días antes de la primera falta (es decir, 4 días antes de la fecha en que debería iniciarse el período). Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el período y obtiene un resultado negativo, existe la posibilidad de que si está embarazada. Consulte la tabla que aparece a continuación para ver los resultados de las pruebas clínicas de Clearblue® PLUS con muestras al comienzo del embarazo.

Pruebas antes de la primera falta	
Número de días antes de la fecha de inicio del período	% de muestras de mujeres con resultado positivo
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

4 ¿Tengo que utilizar una muestra de la primera orina del día?

Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el período, es recomendable que utilice la primera orina del día. En los demás casos, puede hacerlo en cualquier momento del día. Evite la ingesta excesiva de líquido antes de realizar las pruebas.

5 No estoy segura de cuál es la fecha de inicio de mi próximo período. ¿Cómo puedo saber si estoy realizando la prueba en el momento adecuado?

Para averiguar cuándo debería iniciarse el período, calcule la duración habitual de su ciclo mediante el recuento de los días que transcurren desde el primer día del período hasta el día anterior al inicio del período siguiente.

- Si sus ciclos son irregulares, se recomienda esperar un tiempo equivalente al ciclo más largo de los últimos meses antes de hacerse la prueba.
- Si desconoce cuándo debería iniciarse el período, se recomienda esperar un mínimo de 19 días desde la última vez que mantuvo relaciones sexuales sin protección.
- Si el resultado es negativo, pero sigue sospechando que puede estar embarazada, consulte el punto 13.

6 ¿Puede afectar al resultado alguna medicación o enfermedad?

- Lea siempre las instrucciones de los fabricantes de los medicamentos que esté tomando antes de realizar una prueba.
- Los medicamentos contra la esterilidad que contienen la hormona hCG pueden provocar resultados erróneos (como estos medicamentos suelen inyectarse, hacerse la prueba inmediatamente después de su administración puede dar un falso positivo).
- Otros tratamientos contra la esterilidad (como el citrato de clomifeno), los análisis y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deberían afectar al resultado.
- Si ha dejado de tomar recientemente anticonceptivos hormonales o está utilizando tratamientos alternativos contra la esterilidad (como el citrato de clomifeno), es posible que sus ciclos menstruales sean irregulares y, por lo tanto, que se haga la prueba demasiado pronto.

- Si ha estado embarazada recientemente (aunque el embarazo no haya llegado a término), puede obtener un falso positivo.
- El embarazo extrauterino, los quistes ováricos, la menopausia y algunas enfermedades poco habituales pueden dar lugar a resultados erróneos.
- Si ha obtenido un resultado positivo, es posible que descubra más tarde que no está embarazada debido a un aborto espontáneo. Esta circunstancia puede darse durante las fases iniciales del embarazo. Si obtiene resultados inesperados, consulte a su médico.

7 He utilizado la prueba de embarazo, pero la punta que cambia de color no se ha vuelto completamente rosa. ¿Qué debo hacer?

Si la punta que cambia de color no se vuelve completamente rosa, puede que no haya aplicado la suficiente cantidad de orina. Sin embargo, si la línea azul se muestra en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que esta ha funcionado. Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, consulte el punto 8.

8 He utilizado la prueba, pero no ha aparecido ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?

Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que esta no ha funcionado.

- Causas posibles:
 - La punta que cambia de color no se mantuvo orientada hacia abajo o la varilla de prueba no se colocó en posición horizontal sobre una superficie plana una vez aplicada la orina.
 - Se utilizó una cantidad de orina excesiva o insuficiente. **Debe esperar durante 5 segundos a que se procese la muestra.**
- Repita la prueba con una varilla de prueba nueva y siga las instrucciones con atención. Puede recoger una muestra de su orina en un recipiente limpio y seco, y sumergir en ella únicamente la punta que cambia de color durante 5 segundos.

9 ¿Qué ocurre si tengo dudas acerca del resultado?

- Para que el resultado sea positivo, debe aparecer una línea azul en la ventana de control y un signo "+" en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba.
- El aspecto del signo "+" de la ventana de resultado puede variar, pero las líneas que lo forman y la de la ventana de control deben tener una anchura similar (consulte las imágenes A-C).

Figura A

Indica un resultado positivo. Este resultado es más habitual al hacerse la prueba antes de la fecha de inicio del período, cuando los niveles de hCG pueden ser relativamente bajos.

Figura B

Este resultado es normal cuando está embarazada y realiza la prueba el día en el que debería iniciarse el período o en días cercanos, cuando los niveles de hCG pueden ser aún relativamente bajos.

www.clearblue.com

Agentes disponibles de 08:00 a 16:00 h. Lun - Vie, excepto festivos.

900 816 706

Gratis desde red fija, se podrían aplicar cargos adicionales desde red móvil. Todas las llamadas son grabadas y podrían ser monitoreadas por motivos de control de calidad. Por favor, tenga el número de lote de producto disponible.

IVD	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro	LOT	Código de lote	No reutilizar
~	Limitación de temperatura 2-30 °C	Utilizar antes de	Fabricante	

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra (Suiza).
Clearblue es una marca comercial de SPD.
© 2015 SPD Todos los derechos reservados.

Figura C

Este resultado es más habitual cuando está embarazada y realiza la prueba varios días después de la fecha en la que debería iniciarse su período, puesto que los niveles de hCG son mayores.

- Si no está segura del resultado, debería esperar al menos 3 días antes de realizar la prueba otra vez. Cuando la repita, siga las instrucciones con atención.
- Para que el resultado sea negativo, debe aparecer una línea azul en la ventana de control y un signo "-" (menos) en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Si el resultado es negativo, pero sigue sospechando un posible embarazo, consulte el punto 13.
- **¿Qué factores podrían afectar a la precisión del resultado?** Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse su período, la precisión de Clearblue® PLUS será inferior. Si procesa la muestra de orina durante el tiempo necesario, es posible que el resultado no sea fiable. No obstante, si se muestra una línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que el resultado es fiable. Si obtiene resultados inesperados varias veces, consulte a su médico. Consulte también el punto 6.

11 ¿Cuánto debo esperar para conocer el resultado?

Un resultado positivo podría aparecer pasado tan solo 1 minuto si realiza la prueba a partir del día de la falta del período (es decir, el día posterior a aquel en el que el período debería haberse iniciado, pero no lo hizo). Asegúrese de que también aparezca una línea azul en la ventana de control antes de leer el resultado. **Deberá** esperar 3 minutos para confirmar un resultado negativo o si realiza la prueba antes de la fecha de supuesto inicio del período. Si la línea azul no se muestra en la ventana de control en el plazo de **10 minutos**, significa que la prueba no ha funcionado (consulte el punto 8).

12 ¿Durante cuánto tiempo se muestra el resultado?

El resultado se puede leer entre los 3 y los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Una vez que hayan transcurrido 10 minutos, deberá ignorar cualquier cambio en el resultado.

13 La prueba dice que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Puede que no esté embarazada, o que el nivel de la hormona del embarazo aún no sea lo suficientemente alto para ser detectado, o que haya calculado mal el día en que debería iniciarse el período.

- Si ha realizado la prueba antes de la primera falta, vuelva a realizarla cuando esta se produzca.
- Si ya se ha producido la falta, repita la prueba a los 3 días. Si el resultado de esta prueba es negativo y sigue sin tener el período, acuda al médico.

14 La prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Si la prueba indica que está embarazada, debe acudir a su médico. Este le aconsejará acerca de los pasos que debe seguir.

Para conocer los siguientes pasos y obtener información y consejos generales relacionados con el embarazo, visite nuestra página web:

www.clearblue.com

Este dispositivo es para uso doméstico.

Almacénalo a temperatura ambiente.

Si se almacena en un espacio refrigerado, dejar que alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Solo para autodiagnóstico in vitro.

Desechar con los residuos domésticos normales.

No utilizar si el envoltorio de aluminio está dañado.

No utilizar la varilla de prueba después de la fecha de caducidad.



0843