

Clearblue®

Prueba de embarazo

Detección rápida

- Una precisión superior al 99 % a partir del día en el que debería iniciarse su periodo.
- **Lea este folleto con atención antes de realizar una prueba.**

1 Antes de empezar.

Utilice un reloj para realizar la prueba; le será de ayuda.

Puede hacerlo a cualquier hora del día a partir de la fecha en la que debería iniciarse el periodo.

2 Realice la prueba.

Cuando esté preparada para realizar la prueba, retire el envoltorio de aluminio y quite el capuchón. Utilice la varilla de prueba de inmediato.

Puede realizar la prueba directamente en el flujo de orina o en una muestra recogida en un recipiente seco y limpio.

- Sostenga la punta que cambia de color de manera que apunte hacia abajo en el flujo de orina o en la muestra de orina recogida, tal como se muestra, durante 5 segundos.
- La punta que cambia de color se volverá rosa rápidamente para indicar que está absorbiendo la orina. **Debe sostener la punta que cambia de color en la orina durante 5 segundos.**
- Mantenga la punta que cambia de color de manera que apunte hacia abajo o coloque la varilla de



prueba en posición horizontal sobre una superficie plana hasta que esté preparada para leer el resultado y se muestre una línea azul en la ventana de control.



Debe sostener la punta que cambia de color en la orina durante 5 segundos.

Empiece a contar 5 segundos en cuanto vea que la punta que cambia de color se vuelve rosa.

- Puede volver a colocar el capuchón.
- Si la punta que cambia de color no se vuelve completamente rosa, consulte la pregunta 5.

3 minutos

ESPERE 3 MINUTOS. Cuando la prueba empiece a funcionar, comenzarán a formarse líneas azules.

3 Lea el resultado.


Puede leer los resultados en la ventana de resultado.

Debe mostrarse una línea azul en la ventana de control cuando lea el resultado. Esta línea indica que la prueba ha funcionado correctamente.

Un resultado de "Embarazada" podría aparecer en tan solo 1 minuto cuando la prueba se realiza a partir del día de ausencia del periodo (es decir, el día posterior a aquel en el que el periodo debería haberse iniciado).

Debe esperar 3 minutos para confirmar un resultado de "No Embarazada" (consulte la pregunta 8).

Si no observa una línea azul en la ventana de control, entonces la prueba no ha funcionado correctamente (consulte la pregunta 6).

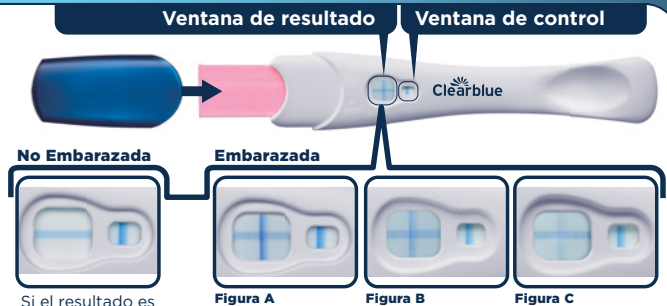

Si el resultado es "No Embarazada", consulte la pregunta 10.

- Si el resultado es "Embarazada", consulte la pregunta 11.
- Si no está segura del resultado, consulte la pregunta 7.

Es indiferente que una de las líneas que forman el signo "+" sea más clara o más oscura que la otra; el resultado sigue siendo de "Embarazada".

IMPORTANTE: Lea los resultados en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Ignore cualquier cambio una vez transcurrido ese tiempo.

Preguntas y respuestas

1 ¿Qué precisión ofrece Clearblue?

Clearblue ofrece una precisión superior al 99 % en pruebas de laboratorio cuando se utiliza a partir del día en el que debería iniciarse el periodo.

2 ¿Cómo funciona Clearblue?

Cuando se está embarazada, el organismo produce la hormona del embarazo (hCG o gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG en el organismo aumenta al comienzo del embarazo. Clearblue Detección rápida puede detectar pequeñas cantidades de esta hormona en su orina (la sensibilidad de esta prueba es de 25 mIU/ml).

3 No estoy segura de cuál es la fecha de inicio de mi próximo periodo. ¿Cómo puedo saber si estoy realizando la prueba en el momento adecuado?

Para averiguar cuándo debería iniciarse el periodo, calcule la duración habitual de su ciclo. Esto se realiza contando los días que transcurren desde el primer día del periodo hasta el día anterior al inicio del periodo siguiente.

- Si sus ciclos son irregulares, se recomienda esperar un tiempo equivalente al ciclo más largo de los últimos meses antes de hacerse la prueba.

Si el resultado es negativo, pero sigue sospechando que puede estar embarazada, consulte la pregunta 10.

4 ¿Puede afectar el estado de salud o alguna medicación al resultado?

- Lea siempre las instrucciones del fabricante de los medicamentos que esté tomando **antes** de realizar la prueba.
- Los medicamentos para la fertilidad que contengan hCG pueden dar lugar a resultados incorrectos (como estos medicamentos suelen inyectarse, hacerse la prueba inmediatamente después de su administración puede dar lugar a un resultado de "Embarazada" falso).
- Otros tratamientos de fertilidad (como el citrato de clomifeno), los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deberían afectar al resultado.
- Si ha dejado de tomar recientemente anticonceptivos hormonales o está utilizando tratamientos de fertilidad (como el citrato de clomifeno), es posible que sus periodos sean irregulares y que, por tanto, se haga la prueba demasiado pronto.
- Si ha estado embarazada recientemente (aunque el embarazo no haya llegado a término), puede obtener un resultado de "Embarazada" falso.
- Los embarazos ectópicos, los quistes ováricos, la menopausia y algunos estados de salud poco habituales pueden dar lugar a resultados incorrectos.
- Si ha obtenido un resultado de "Embarazada", es posible que más tarde descubra que no está embarazada debido a un aborto espontáneo. Esta circunstancia puede darse durante las fases iniciales.

Si obtiene resultados inesperados, consulte con su médico.

5 He utilizado la prueba de embarazo, pero la punta que cambia de color no se ha vuelto completamente rosa. ¿Qué debo hacer?

Si la punta que cambia de color no se vuelve completamente rosa, puede que no haya aplicado la suficiente cantidad de orina. Sin embargo, si la línea azul se muestra en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que esta ha funcionado. Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, consulte la pregunta 6.

6 He utilizado la prueba de embarazo, pero no ha aparecido ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?

Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que esta no ha funcionado. Causas posibles:

- La punta que cambia de color no se mantuvo apuntando hacia abajo o la varilla de prueba no se dejó en posición horizontal después de que se aplicara la orina.
- Se usó demasiada o muy poca orina. **La muestra se debe tomar durante 5 segundos.**

Debe repetir la prueba con una varilla de prueba nueva procurando seguir las instrucciones. Puede recoger una muestra de orina en un recipiente limpio y seco, y sumergir en ella únicamente la punta que cambia de color durante 5 segundos.

7 ¿Qué debo hacer si no estoy segura del resultado?

- Para que el resultado sea de "Embarazada", debe aparecer una línea azul en la ventana de control y un signo "+" en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba.

El aspecto del signo "+" en la ventana de resultado puede variar, sin embargo, las líneas que lo conforman y la línea en la ventana de control deben tener una anchura similar (consulte las imágenes A-C).

Figura A

Este resultado es más habitual cuando está embarazada y realiza la prueba varios días después de la fecha de la ausencia del periodo, puesto que los niveles de hCG son mayores.

Figura B

Este resultado es normal cuando está embarazada y realiza la prueba en la fecha en la se produce la ausencia del periodo o en días cercanos, cuando los niveles de hCG pueden ser aún relativamente bajos.

Figura C

Aunque débil, sigue indicando un resultado positivo.

Si no está segura del resultado, debería esperar al menos 3 días antes de volver a realizar la prueba. Cuando la repita, siga las instrucciones con atención.

- Para que el resultado sea de "No Embarazada", debe aparecer una línea azul en la ventana de control y un signo "-" (menos) en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Si el resultado es negativo, pero sigue sospechando un posible embarazo, consulte la pregunta 10.

8 ¿Cuánto debo esperar para conocer el resultado?

Un resultado de "Embarazada" podría aparecer en 1 minuto cuando la prueba se realiza a partir del día de ausencia del periodo (es decir, el día posterior a aquel en el que el periodo debería haberse iniciado). Asegúrese de que también aparezca una línea azul en la ventana de control antes de leer el resultado. **Debe** esperar 3 minutos para confirmar un resultado de "No Embarazada". Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores, significa que la prueba no ha funcionado (consulte la pregunta 6).

9 ¿Durante cuánto tiempo se muestra el resultado?

El resultado se puede leer entre los 3 y los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Una vez que hayan transcurrido los 10 minutos, debe ignorar cualquier cambio en el resultado.

10 La prueba dice que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Puede que no esté embarazada, o que el nivel de la hormona del embarazo aún no sea lo suficientemente alto para ser detectado, o que haya calculado mal el día en que debería iniciarse el periodo.

- Si realizó la prueba de forma anticipada, realice la prueba nuevamente en la fecha en la que debería iniciarse el periodo.
- Si no le ha venido el periodo, repita la prueba a los 3 días.

Si obtiene un resultado de "No Embarazada" y sigue sin venirle el periodo, consulte a su médico.

11 La prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Si la prueba indica que está embarazada, debe consultar a su médico para que le aconseje sobre las medidas que debe adoptar.

www.clearblue.com

Agentes disponibles de 08:00 a 16:00 h. lun - vie, excepto festivos.

900 816 706

Gratuito desde red fija, se podrían aplicar cargos adicionales desde red móvil. Todas las llamadas son grabadas y podrían ser monitoreadas por motivos de control de calidad. Por favor, tenga el número de lote del producto disponible.

Para conocer los siguientes pasos, información y consejos generales sobre cuestiones relacionadas con el embarazo, visite nuestro sitio web en: **www.clearblue.com**

	Fabricante		No reutilizar
	Número de lote		Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Fecha de caducidad		Límite de temperatura 2-30 °C

Test para autodiagnóstico *in vitro*.

Autodiagnóstico en casa.

Solo para uso de diagnóstico *in vitro*.

No apto para uso interno.

No reutilizar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar a entre 2 y 30 °C.

En caso de que el dispositivo se haya conservado refrigerado, deje que alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba.

No utilizar si el envoltorio de aluminio está dañado.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

Desear con los residuos domésticos normales.



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra (Suiza).

Clearblue es una marca comercial de SPD.

© 2017 SPD. Todos los derechos reservados.

2300490.01 06-2017



0843