

Clearblue

PLUS

con PUNTA DE COLOR VARIABLE

Clearblue PLUS ofrece una precisión superior al 99 % desde la primera falta.
Clearblue PLUS se puede utilizar hasta cuatro días antes de la fecha en la que debería iniciarse el período.
Lea este folleto con atención antes de realizar una prueba.

Prueba de embarazo

Antes de empezar

Utilice un reloj para realizar la prueba, le será de ayuda.

1 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Si realiza la prueba a partir del día en que debería iniciarse el período, puede hacerlo a cualquier hora del día.

Si realiza la prueba con anterioridad, utilice la primera orina del día.
• Cuando esté preparada para realizar la prueba, extraiga la varilla de prueba del envoltorio de aluminio y retire la tapa azul. Utilice la varilla de prueba de inmediato.

REALICE LA PRUEBA CON SU ORINA

Puede realizar la prueba directamente en el flujo de orina o en una muestra recogida en un recipiente seco y limpio.

• Sostenga la punta de color variable de manera que apunte hacia abajo en el flujo de orina o en la muestra de orina

Consulte el punto 7 si la punta de color variable no se ha vuelto completamente rosa.



recogida, tal como se muestra, durante **5 segundos**.
• La punta de color variable se volverá rosa rápidamente para indicar que está absorbiendo la orina. **Debe sostener la punta de color variable en la orina durante 5 segundos.**



• Mantenga la punta de color variable de manera que apunte hacia abajo o coloque la varilla de prueba en posición horizontal sobre una superficie plana hasta que esté preparada para leer el resultado y se muestre una línea azul en la ventana de control.
• Puede volver a colocar la tapa.

3 minutos

ESPERE 3 MINUTOS.

Cuando la prueba empiece a funcionar, comenzarán a formarse líneas azules.


3 LECTURA DEL RESULTADO

Puede leer el resultado en la ventana de resultado.

Debe mostrarse una línea azul en la ventana de control cuando lea el resultado. Esta línea indica que la prueba ha funcionado correctamente.

Un resultado positivo podría aparecer pasado 1 minuto cuando la prueba se realiza a partir del día de la falta del período (es decir, el día posterior a aquel en el que el período debería haberse iniciado, pero no lo hizo). Debería esperar 3 minutos completos para confirmar un resultado negativo o en el caso de que realice la prueba antes de que falte el período (consulte el punto 11).

Ventana de resultado Ventana de control

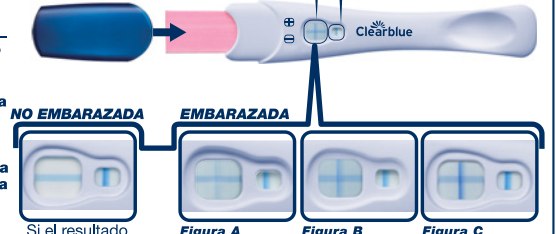

NO EMBARAZADA
Si el resultado es negativo, consulte el punto 13 de la sección Preguntas y respuestas.

EMBARAZADA

Si el resultado es positivo, consulte el punto 14 de la sección Preguntas y respuestas.

Es indiferente que una de las líneas que forman el símbolo "+" sea más clara o más oscura que la otra; el resultado sigue siendo positivo.

IMPORTANTE.

Lea el resultado durante los **10 minutos** posteriores a la realización de la prueba.
Ignore cualquier cambio una vez transcurrido ese tiempo.

Si todavía tiene dudas acerca del resultado, consulte el punto 9 para obtener más información.

Preguntas y respuestas: en la siguiente sección encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes.

Preguntas y respuestas

1 ¿Qué porcentaje de precisión ofrece Clearblue PLUS?

Clearblue PLUS ofrece una precisión superior al 99 % en pruebas de laboratorio cuando se utiliza desde la fecha en la que debería iniciarse el período.

2 ¿Cómo funciona Clearblue PLUS?

Durante el embarazo, el cuerpo produce la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG en el cuerpo aumenta al comienzo del embarazo. Clearblue PLUS puede detectar pequeñas cantidades de esta hormona en la orina (la sensibilidad de esta prueba es de 25 mIU/ml).

3 ¿Cuándo puede utilizar una prueba Clearblue PLUS?

Clearblue PLUS se puede utilizar hasta cuatro días antes de la fecha en la que debería iniciarse el período. Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el período y obtiene un resultado negativo, existe una posibilidad de que si esté embarazada. Consulte la tabla que se muestra a continuación para ver los resultados de las pruebas clínicas de Clearblue PLUS con muestras al comienzo del embarazo.

Pruebas anticipadas

Clearblue recomienda que la prueba se realice a partir de la fecha en la que debería iniciarse el período. Sin embargo, la hormona del embarazo aumenta rápidamente al comienzo del embarazo y Clearblue PLUS se puede utilizar para realizar pruebas hasta cuatro días antes de la fecha en la que debería iniciarse el período. En las pruebas clínicas realizadas con muestras al comienzo del embarazo, Clearblue PLUS presentó los siguientes resultados:

N.º de días antes de la fecha de inicio del período	% de muestras de mujeres embarazadas con resultado positivo
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

4 ¿Tengo que utilizar una muestra de la primera orina del día?

Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el período, es recomendable que utilice la primera orina del día. En los demás casos, puede hacerlo en cualquier momento del día. Evite la ingesta excesiva de líquido antes de realizar las pruebas.

5 No estoy segura de cuál es la fecha de inicio de mi próximo período. ¿Cómo puedo saber si estoy realizando la prueba en el momento adecuado?

Para averiguar cuándo debería iniciarse el período, calcule la duración habitual de su ciclo. Este cálculo se realiza contando los días que transcurren desde el primer día del período hasta el día anterior al inicio de su período siguiente.

- Si sus ciclos son irregulares, tome como referencia el ciclo más largo de los últimos meses previos a la realización de la prueba.
- Si no sabe cuándo debería iniciarse el período, le recomendamos que espere diecinueve días como mínimo después de la última vez que mantuvo relaciones sexuales sin protección.
- Si el resultado es negativo y sigue teniendo dudas, consulte el punto 13.

6 ¿Puede afectar al resultado alguna medicación o enfermedad?

• Lea siempre las instrucciones de los fabricantes de los medicamentos que esté tomando antes de realizar una prueba.
• Los medicamentos para la fertilidad que contienen hCG pueden provocar resultados erróneos (estos medicamentos suelen inyectarse, y la realización de pruebas inmediatamente después de su administración puede generar un falso positivo).

• Otros tratamientos para la fertilidad (como el citrato de clomifeno), los anticonceptivos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deberían afectar al resultado.

• Si ha dejado de tomar recientemente anticonceptivos hormonales o está utilizando tratamientos alternativos para la fertilidad (como el citrato de clomifeno), es posible que sus ciclos menstruales sean irregulares y, por lo tanto, que realice la prueba demasiado pronto.

- Si ha estado embarazada recientemente (aunque el embarazo no haya llegado a término), puede obtener un falso positivo.
- El embarazo extrauterino, los quistes ováricos, la menopausia y algunas enfermedades poco habituales pueden causar resultados erróneos.
- Si ha obtenido un resultado positivo, es posible que descubra más tarde que no está embarazada debido a un aborto espontáneo. Esta circunstancia puede darse durante las fases iniciales.
- Si obtiene resultados inesperados, consulte a su médico.

7 He utilizado la prueba, pero la punta de color variable no se ha vuelto completamente rosa. ¿Qué debo hacer?

Si la punta de color variable no se vuelve completamente rosa, puede que no haya aplicado la suficiente cantidad de orina. Sin embargo, si la línea azul se muestra en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que esta ha funcionado. Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, consulte el punto 8.

8 He utilizado la prueba, pero no ha aparecido ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?

Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que ésta no ha funcionado. Causas posibles:

- La punta de color variable no se mantuvo orientada hacia abajo o la varilla de prueba no se colocó en posición horizontal sobre una superficie plana una vez aplicada la orina.
- Se utilizó demasiada o muy poca orina. **Debe mantener el contacto con la muestra durante 5 segundos.**

Debe repetir la prueba con una varilla de prueba nueva, y seguir las instrucciones con atención. Puede recoger una muestra de su orina en un recipiente limpio y seco, y sumergir en ella la punta de color variable durante solo 5 segundos.

9 ¿Qué ocurre si tengo dudas acerca del resultado?

• Para que el resultado sea positivo, se debe mostrar una línea azul en la ventana de control y un símbolo "+" en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba.

La aparición del símbolo "+" en la ventana de resultado puede variar, pero las líneas que conforman dicho símbolo y la línea de la ventana de control deben tener una anchura similar (consulte las figuras A-C).

Figura A

Indica un resultado positivo. Este resultado es más habitual cuando se realiza la prueba antes del inicio del período, cuando sus niveles de hCG pueden ser relativamente bajos.

Figura B

Este resultado es normal cuando está embarazada y realiza la prueba el día en el que debería iniciarse el período o en días cercanos, cuando los niveles de hCG pueden ser aún relativamente bajos.

Figura C

Este resultado es más habitual cuando está embarazada y realiza la prueba varios días después de la fecha en la que debería iniciarse su período, puesto que los niveles de hCG son mayores.

Si no está segura del resultado, debería esperar al menos tres días antes de realizar la prueba otra vez. Cuando la repita, siga las instrucciones con atención.

• Para que el resultado sea negativo, se debe mostrar una línea azul en la ventana de control y un símbolo "-" (menos) en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Si el resultado es negativo y sigue teniendo dudas, consulte el punto 13.

10 ¿Qué factores podrían afectar a la precisión del resultado?

Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse su período, la precisión de Clearblue PLUS será inferior. Si no toma la muestra de orina durante el tiempo necesario, es posible que el resultado no sea fiable.

No obstante, si se muestra una línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que el resultado es fiable. Si obtiene resultados inesperados varias veces, consulte a su médico. Consulte también el punto 6.

11 ¿Cuánto debo esperar para conocer el resultado?

Un resultado positivo podría aparecer pasado tan solo 1 minuto cuando la prueba se realiza a partir del día de la falta del período (es decir, el día posterior a aquel en el que el período debería haberse iniciado, pero no lo hizo). Asegúrese de que también aparezca una línea azul en la ventana de control antes de leer el resultado. **Debe esperar 3 minutos** para confirmar un resultado negativo o en el caso de que realice la prueba antes de que falte el período. Si la línea azul no se muestra en la ventana de control en el plazo de **10 minutos**, significa que la prueba no ha funcionado (consulte el punto 8).

12 ¿Durante cuánto tiempo se muestra el resultado?

El resultado se puede leer entre los 3 y los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Una vez que hayan transcurrido los 10 minutos, debe ignorar cualquier cambio en el resultado.

13 La prueba indica que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Es posible que no esté embarazada o que el nivel de la hormona del embarazo aún no sea detectable. También cabe la posibilidad de que haya calculado mal la fecha de inicio del período.

- Si ha realizado la prueba demasiado pronto, vuelva a realizarla en la fecha en la que debería iniciarse el período.
- Si ya se ha producido la falta, repita la prueba después de tres días.

Si el resultado de esta prueba es negativo y sigue sin tener el período, acuda al médico.

14 La prueba indica que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Si la prueba indica que está embarazada, debe acudir a su médico. Este le aconsejará acerca de los pasos que debe seguir.

Agentes disponibles de 08:00 a 16:00 h. Lun - Vie, excepto festivos.

900 816 706

Gratuito desde red fija, se podrían aplicar cargos adicionales desde red móvil. Todas las llamadas son grabadas y podrían ser monitoreadas por motivos de control de calidad. Por favor, tenga el número de lote del producto disponible.

IVD	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro	LOT	Número de lote	No reutilizar
	Límite de temperatura 2-30 °C		Fecha de caducidad	Fabricante

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra (Suiza).

© 2014 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Todos los derechos reservados.

Clearblue es una marca comercial.

Distribuido por: Procter & Gamble España S.A. Avenida de Bruselas 24, 28108 Alcobendas, Madrid, España.

Para conocer los siguientes pasos y obtener información y consejos generales relacionados con el embarazo, visite nuestra página web:

www.clearblue.com

Este dispositivo es para uso doméstico.

Almacenar a temperatura ambiente.

Si se almacenó en un espacio refrigerado, dejar que alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Solo para autodiagnóstico in vitro.

Desechar con los residuos domésticos normales.

No utilizar si el envoltorio de aluminio está dañado.

No utilizar la varilla de prueba después de la fecha de caducidad.



0843