



## Prueba de embarazo

Ultratemprana digital



Para autodiagnóstico. Lea este folleto con atención antes de realizar la prueba.



Puede realizar la prueba  
**6 días**  
antes de la ausencia del periodo<sup>1</sup>



Si realiza la prueba con anticipación,  
utilice la primera orina del día  
De lo contrario, puede hacerlo en cualquier momento



No beba  
mucho líquido  
antes de realizar la prueba



Nunca sujeté la varilla de prueba con la punta apuntando hacia arriba

### 1 Realice la prueba

Retire la varilla de prueba del envoltorio, quite el capuchón y utilícela inmediatamente. **Realice** la prueba en:



su flujo de orina



una muestra de orina recogida

**Retire la punta absorbente de la orina cuando la luz de parada COMIENCE a parpadear.**

Esto suele tardar unos 5 segundos. La luz continuará parpadeando brevemente y, luego, se apagará. Mantenga la punta absorbente apuntando hacia abajo, vuelva a colocar el capuchón y deje la varilla de prueba en posición horizontal.

### 2 Espere


El contador regresivo inteligente se mostrará en la pantalla y cada segmento aparecerá en secuencia para indicar que la prueba está avanzando.



Si el contador regresivo inteligente no ha aparecido, consulte "Errores de la prueba".


### 3 Lea el resultado

El contador regresivo inteligente terminará en 1-5 minutos y el resultado aparecerá en la pantalla.

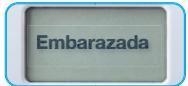

Puede tener una certitud de más del 99 % de que está embarazada, sin importar cuándo se realice la prueba.

Consulte la pregunta 1 para obtener más información.

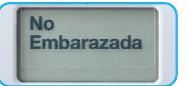

Si se realizó una prueba de forma anticipada, todavía existe la posibilidad de que esté embarazada, ya que la cantidad de hormona aumenta rápidamente al comienzo del embarazo.

Consulte la pregunta 2 para obtener más información.

# Preguntas y respuestas

## 1 El resultado es "Embarazada", ¿Qué debo hacer?

Consulte a su médico para que le aconseje sobre las medidas que debe adoptar.

Es posible obtener un resultado positivo y luego descubrir que ya no está embarazada (consulte la pregunta 6).

El resultado de "Embarazada" permanece en la pantalla durante un máximo de 1 mes.

## 2 El resultado es "No Embarazada". ¿Qué significa esto?

Es posible que no esté embarazada o que el nivel de la hormona del embarazo no sea aún lo suficientemente alto como para detectarse. Vuelva a realizar la prueba dentro de tres días. Si el resultado de esta prueba es "No Embarazada" y se le está retrasando el período, vaya a ver a su médico.

## 3 ¿Cuándo puedo realizar la prueba?

Esta prueba puede usarse a partir de 6 días antes de la ausencia del período (5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse el período).

**Si el resultado es de "Embarazada", puede tener una certitud de más del 99 % de que está embarazada, sin importar cuándo se realice la prueba.**

Sin embargo, como los niveles hormonales varían de una mujer a otra y pueden ser muy bajos en las primeras etapas del embarazo, es posible que esté embarazada, pero que aun así obtenga un resultado negativo.

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de embarazos que se detectaron en las pruebas de laboratorio mediante la recogida de muestras de orina al comienzo del embarazo:

Días antes de la ausencia del período	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Embarazos detectados	>99 %	>99 %	>99 %	99 %	93 %	78 %

## 4 ¿Cómo funciona Clearblue?

La prueba detecta la hormona del embarazo (hCG o gonadotropina coriónica humana) en la orina. La sensibilidad de la prueba es de

10 mIU/ml. Tiene una precisión superior al 99 % en las pruebas de laboratorio a partir de la fecha en la que debería iniciarse el período.

## 5 ¿Puede afectar el estado de salud o alguna medicación al resultado?

Lea siempre las instrucciones del fabricante de los medicamentos que esté tomando antes de hacer la prueba.

Los medicamentos que contienen hCG y algunas enfermedades poco habituales pueden originar resultados falsos positivos.

Los embarazos ectópicos y los embarazos recientes, aunque este no haya llegado a término, pueden dar lugar a resultados incorrectos. Si se está acercando a la menopausia, puede obtener un resultado de embarazo falso a pesar de no estar embarazada.

La prueba NO debería verse afectada por los tratamientos hormonales que contengan citrato de clomifeno, analgésicos, alcohol, antibióticos o la píldora anticonceptiva. Si obtiene resultados inesperados, consulte a su médico.

## 6 Realicé la prueba anteriormente y el resultado fue de "Embarazada". He vuelto a realizar la prueba y el resultado ha sido de "No Embarazada" o ha comenzado mi período.

### ¿Qué significa esto?

Es posible obtener un resultado positivo y luego descubrir que ya no está embarazada. Esto se denomina "aborted espontáneo precoz", lo que, lamentablemente, no es poco común y afecta a alrededor de 1 de cada 4 embarazos. Por fortuna, la mayoría de las mujeres pueden tener un embarazo saludable después.

## Cómo desechar la prueba

Extraiga las pilas antes de desechar la varilla de prueba. Las pilas deben desecharse de acuerdo con el plan de reciclaje adecuado. Para extraerlas, inserte el **borde curvado del capuchón** en el lateral de la varilla de prueba y gírela para abrirla.

**Precaución:** No desmonte, recargue ni tire las pilas al fuego. Deseche el resto de la varilla de acuerdo con el plan de reciclaje adecuado para equipos eléctricos. No tire el equipo eléctrico al fuego.

## Errores de la prueba

### Error de registro

Se ha producido un error durante la prueba. Puede ser que:

- La punta absorbente no se haya mantenido apuntando hacia abajo.
- La prueba no se colocara en posición horizontal después de la aplicación de la orina.
- Se aplicara demasiada o muy poca orina en la punta.

Repite el proceso con una nueva prueba procurando seguir las instrucciones.

### Error en blanco

Si el contador regresivo inteligente no aparece después de la prueba o comienza a funcionar, pero luego la pantalla se queda en blanco, deberá realizar otra prueba. Repita el proceso con una nueva prueba procurando seguir las instrucciones.

## www.clearblue.com

Agentes disponibles de 08:00 a 16:00 h. lun - vie, excepto festivos.

**900 816 706** Las llamadas son gratuitas.

Todas las llamadas son grabadas y podrían ser monitoreadas por motivos de control de calidad. Cuando nos llame, tenga el producto y la caja a mano, incluidas las bolsas de aluminio.

Test para autodiagnóstico *in vitro*. Autodiagnóstico en casa.

Solo para uso de diagnóstico *in vitro*. No apto para uso interno.

No reutilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a entre 2 y 30 °C. En caso de que el dispositivo se haya conservado refrigerado, deje que alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba. No utilizar si el envoltorio de aluminio está dañado. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Este producto incluye pilas. Contiene piezas pequeñas. No ingerir ningún componente de este dispositivo. En caso de que ocurra por accidente, busque atención médica. Deseche de acuerdo con las normativas locales. Informe a Clearblue de cualquier lesión causada por el uso de este producto.

 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra (Suiza).

<sup>1</sup> El 78 % de los resultados positivos pueden detectarse 6 días antes de la ausencia del período (5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse el período).

Este dispositivo digital de diagnóstico *in vitro* cumple los requisitos sobre emisiones e inmunidad de la norma EN 61326-2-6. Las contramedidas de CEM utilizadas en este instrumento electrónico proporcionarán una protección razonable frente a los efectos de las interferencias electromagnéticas que es probable que encuentre en un entorno doméstico. Las advertencias preventivas siguientes se aplican al equipo conforme con la norma EN 61326-2-6.

- a) El uso de este instrumento en un ambiente seco, especialmente si hay materiales sintéticos (ropa sintética, alfombras, etc.), puede provocar descargas estáticas dañinas que podrían provocar resultados incorrectos.
- b) No use este instrumento cerca de fuentes de gran radiación electromagnética como, por ejemplo, teléfonos móviles, ya que puede que no funcione correctamente.

LOT	Número de lote	IVD	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Fabricante
	Fecha de caducidad		Límite de temperatura de entre 2 y 30 °C		No reutilizar

Clearblue es una marca comercial de SPD.  
© 2020 SPD. Todos los derechos reservados.

2300586.02 11-2020

